


# 「低侵襲脊椎手術用3Dドレープ法」 脊椎ナビゲーション時に特に有用



当院で採用している脊椎ナビゲーションシステム用全面ドレープセットは、清潔カバーで覆ったイメージを360度回転させても、術野を清潔に保てるように工夫し、株式会社ホギメディカルに特注セットとして依頼しています。準備方法とドレーピング手順のポイントをご紹介します。

名古屋第二赤十字病院 整形外科・脊椎脊髄外科 部長 佐藤 公治

## ■イメージへの清潔カバー装着手順

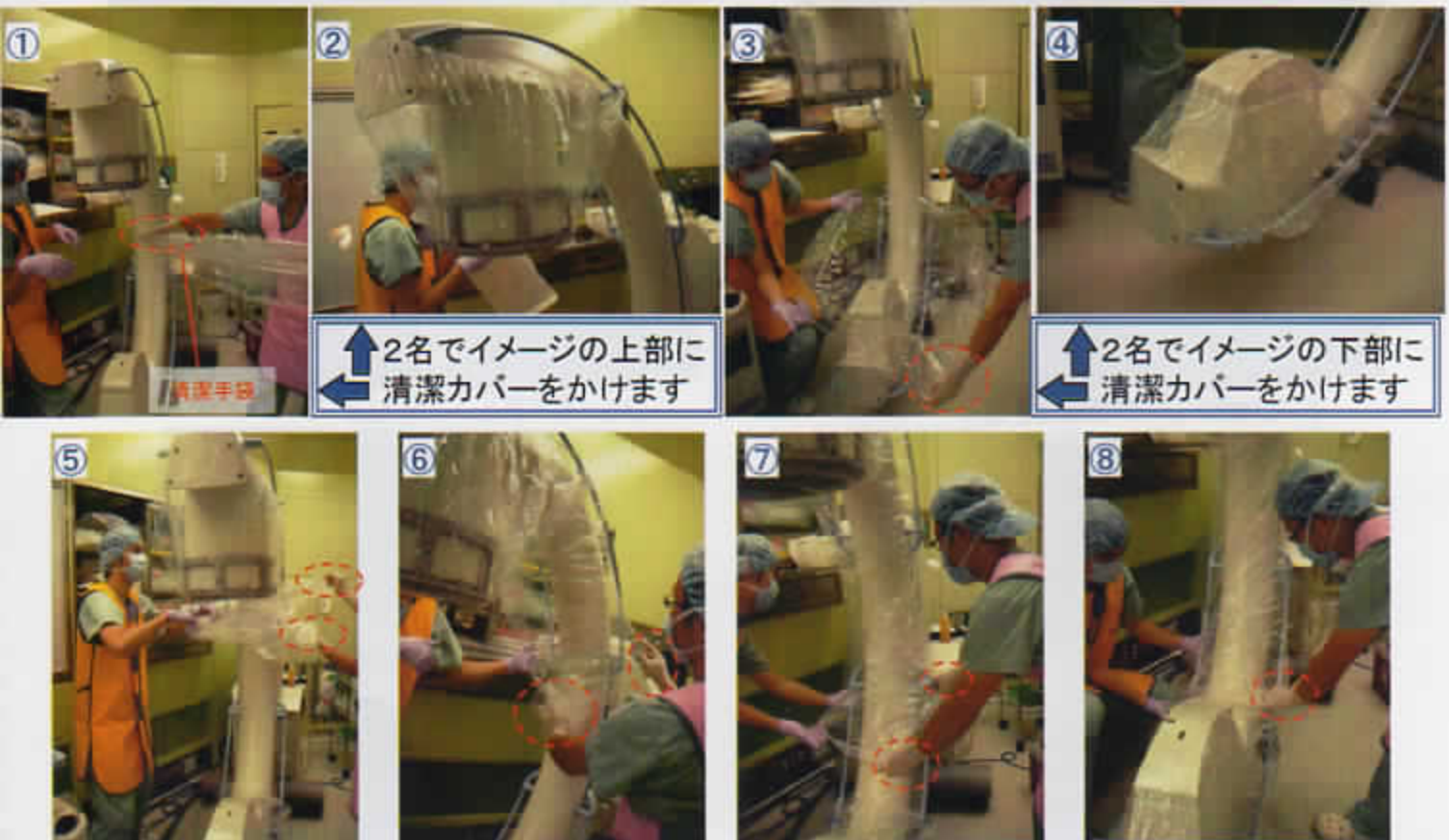

② 2名でイメージの上部に  
清潔カバーをかけます

④ 2名でイメージの下部に  
清潔カバーをかけます

⑤ 2名でアーム内側にも清潔カバーをかけます

## ■患者様へのドレーピング手順



② オーバーテーブルカバーでオーバーテーブルと尾側を覆う



③ テープ無しドレープで頭側を覆う



④ テープ付き小ドレープのテープを剥がす



⑤ テープ付き小ドレープを左側へ貼る



⑥ テープ付き小ドレープを右側へ貼る



⑦ プラスチックドレープを貼る



⑧ 全面ドレープで全体を覆う



9 全面ドレープのすそを右側から左側へ送る



13 右側から送られたすそを介助者が受け取る



10 右側から送られた全面ドレープのすそを清潔手袋装着した介助者がまとめる



14 下面をきれいに覆うようにドレーピングする



11 まとめたすそをオيفテープで留める



15 オيفテープで3箇所程度とめる



12 さらにテープ付ドレープを右側面に張りそのすそを左側へ送る



16 360度清潔野を確保するドレーピング完了

## ■イメージ動作風景

不潔野が露呈しておらず、ドレープのすそなどもイメージに当たらないよう工夫されている



手術中のイメージ位置  
清潔に保たれるように工夫  
されている

## ■お問合せ先

**+** 名古屋第二赤十字病院 整形外科・脊椎脊髄外科

〒466-8650

愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9

TEL 052-832-1121

FAX 052-832-1130

Mail [ortho@nagoya2.jrc.or.jp](mailto:ortho@nagoya2.jrc.or.jp)